



msdi

Catalogo Prodotti






Feel the connection

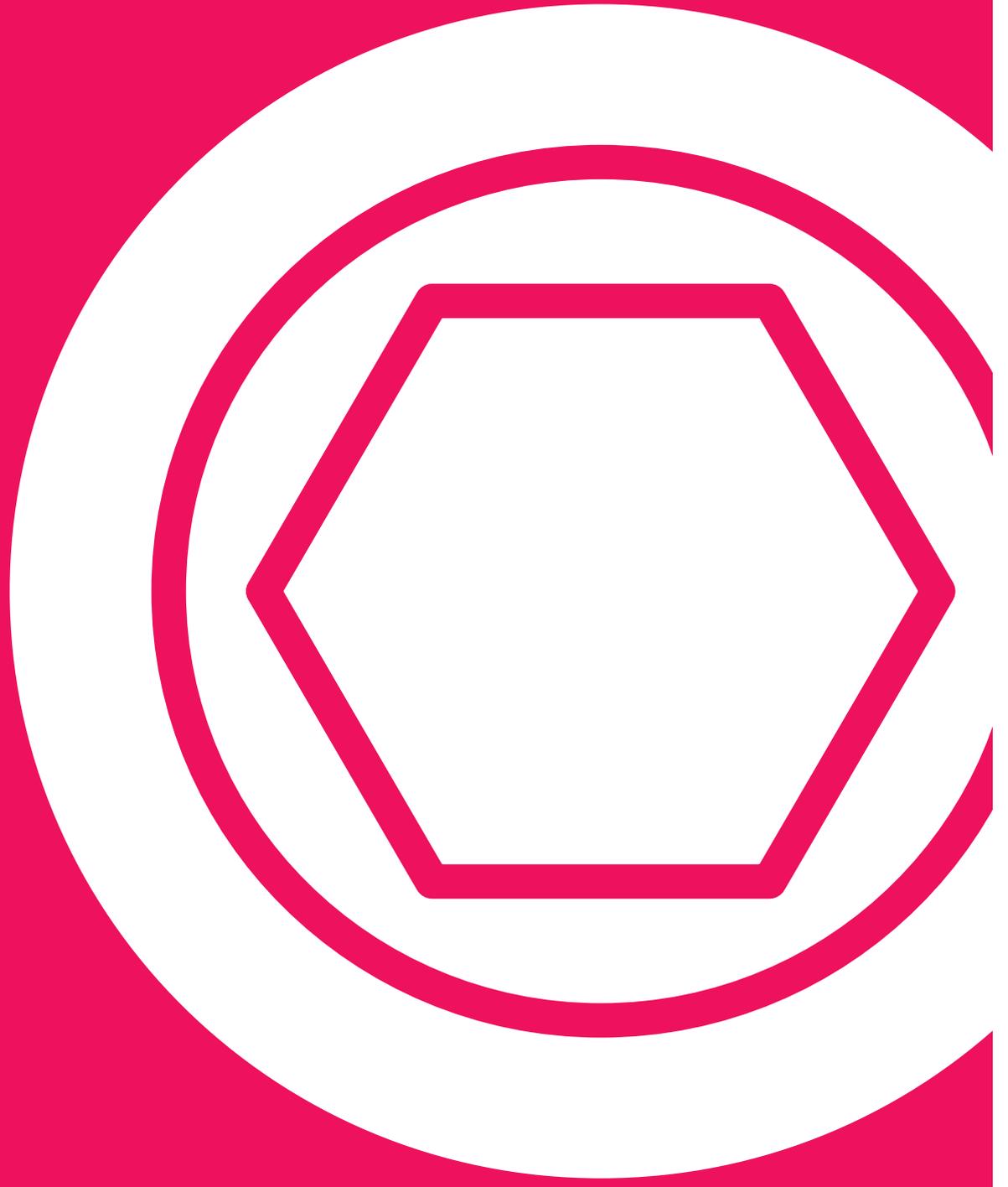

Alef

Alef - La Connessione Classic


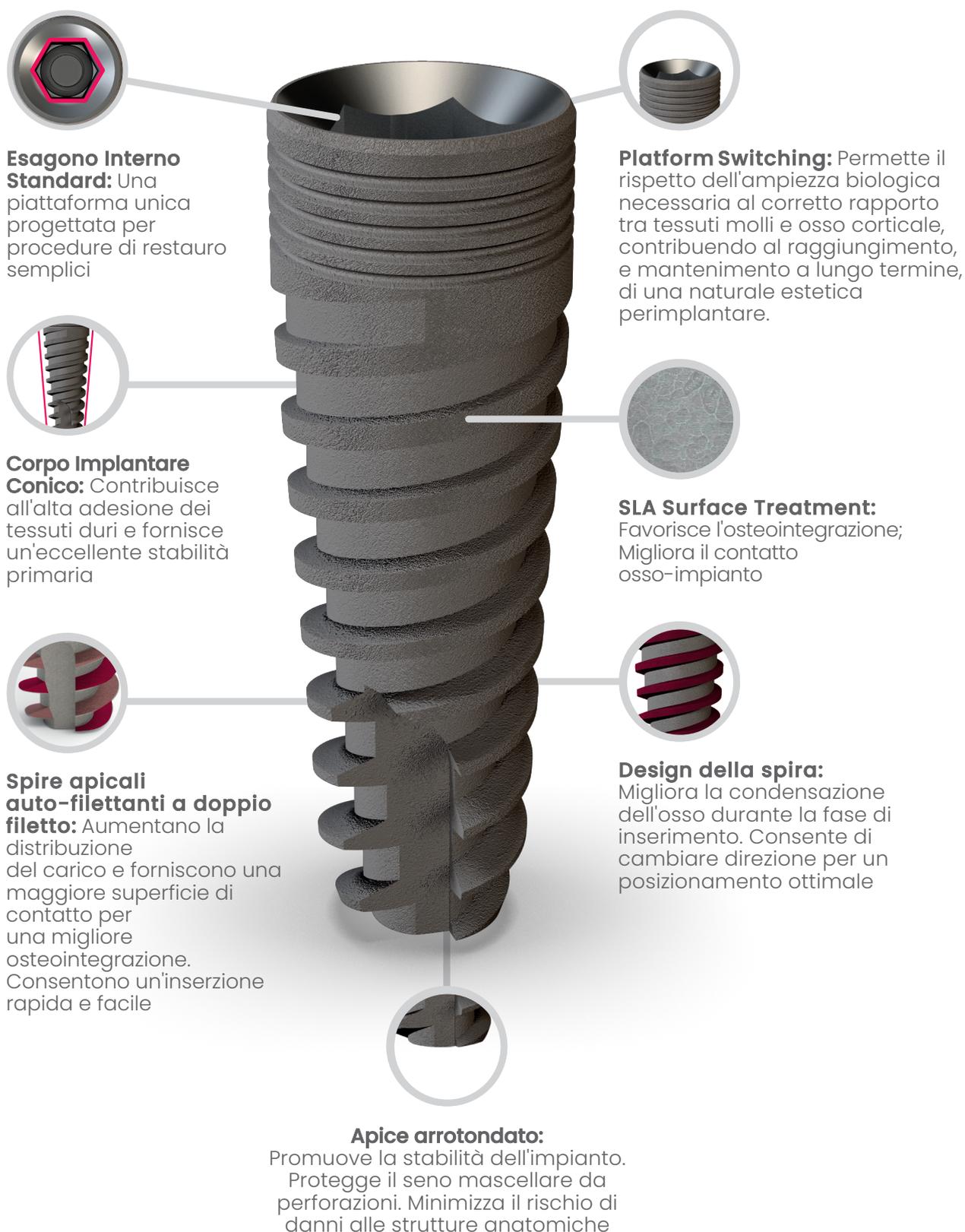


Misure disponibili

Ø mm	Lunghezza					
	6mm	8mm	10mm	11.5mm	13mm	16mm
● Ø3.5		AL3508	AL3510	AL3511	AL3513	AL3516
● Ø3.75		AL3708	AL3710	AL3711	AL3713	AL3716
● Ø4.2	AL4206	AL4208	AL4210	AL4211	AL4213	AL4216
● Ø5.0	AL5006	AL5008	AL5010	AL5011	AL5013	AL5016
● Ø6.0	AL6006	AL6008	AL6010	AL6011	AL6013	

Dimensioni

P Ø Piattaforma 3.5mm	D	A	AP
	Ø Impianto	Ø Apicale	Ø Apice
	3.5mm	2.7mm	1.7mm
	3.75mm	2.9mm	1.9mm
	4.2mm	3.35mm	2.35mm
	5.0mm	4.15mm	3.15mm
	6.0mm	5.15mm	4.15mm

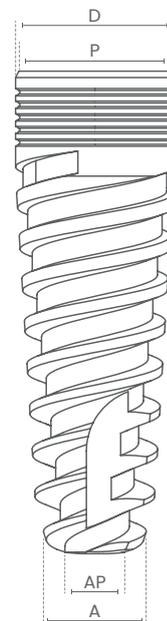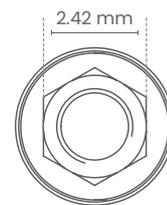

Vite chirurgica di chiusura



Rif

ALCS

Protocollo di osteotomia

									
Fresa	Ø1.9*	Ø2.00	Ø2.80	Ø3.20	Ø3.65	Ø4.0	Ø4.5	Ø5.0	Ø5.5
Velocità fresa (rpm)	1200-1500	900-1200	900-1000	800-1000	500-700	400-700	400-600	400-600	400-600
 Ø3.5	Ossso Morbido	✓	●	●**					
	Ossso Duro	✓	●	●	●**				
 Ø3.75	Ossso Morbido	✓	●	●	●**				
	Ossso Duro	✓	●	●	●	●**			
 Ø4.2	Ossso Morbido	✓	●	●	●	●**			
	Ossso Duro	✓	●	●	●	●	●**		
 Ø5.0	Ossso Morbido	✓	●	●	●	●	●**		
	Ossso Duro	✓	●	●	●	●	●	●**	
 Ø6.0	Ossso Morbido	✓	●	●	●	●	●	●**	
	Ossso Duro	✓	●	●	●	●	●	●	●**

* Fresa per marcatura

** Fresaggio della zona corticale, al massimo per 2/3 della lunghezza implantare


*** Tutte le misure sono in mm

**** La procedura raccomandata nel protocollo non dovrebbe sostituire il giudizio del dentista/chirurgo

Il trattamento di superficie "SLA"

Il trattamento "SLA" (Sandblasted, Large grit, Acid-etched) è ben noto in implantologia e il suo utilizzo si è diffuso anche grazie al supporto di numerosi studi clinici che ne testimoniano l'affidabilità, la riduzione dei tempi di guarigione e l'aumento della sopravvivenza implantare a lungo termine.

Sulla base dei dati più aggiornati e per garantire risultati prevedibili nel tempo, tutti gli impianti MSDI sono sottoposti al trattamento superficiale "SLA".

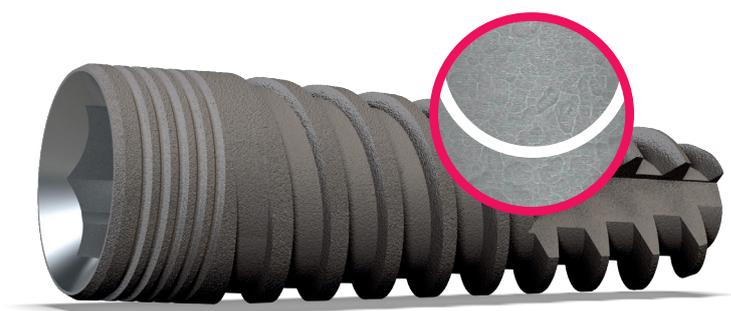

Torque raccomandati per il sistema implantare Alef

Sistema Alef	Max. Torque raccomandato - Ncm
Impianti Alef	60
Viti chirurgiche di chiusura	35
Viti di guarigione	20
Monconi Dritti	35
Monconi Angolati	35
Monconi calcinabili	20
Monconi calcinabili con base Ti	35
Monconi calcinabili con base in CoCr	35
Attacchi sferici	35
Moncone Dritto Multi-Unit	15-20
Moncone Angolato Multi-Unit	15-20
Viti di guarigione Multi-Unit	15-20
Ti-Base	35
Ti-Base Multi-Unit	15-20



Viti di guarigione



		Altezza (H)					
		2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
Stretta	Ø3.8mm		HCN3	HCN4	HCN5	HCN6	HCN7
Standard	Ø4.5mm	HC2	HC3	HC4	HC5	HC6	HC7
Larga	Ø5.5mm	HCW2	HCW3	HCW4	HCW5	HCW6	

Viti di guarigione anatomiche



		Altezza (H)				
		2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
Standard	Ø4.5mm	AHC2	AHC3	AHC4	AHC5	AHC6
Larga	Ø5.5mm	AHCW2	AHCW3	AHCW4	AHCW5	AHCW6

Componenti da impronta

Transfers



Aperto



Chiuso



Click

		Altezza (H)	
		Corto 9mm	Lungo 13mm
Tray Aperto	Ø4.5mm	TROS	TROL
Tray Chiuso	Ø4.5mm	TRC	
Click	Ø4.5mm	TRKS	TRKL

Transfer Snap-On



		Altezza Collare (CH)			
		1mm	2mm	3mm	4mm
Ø4.78mm		SOTR1	SOTR2	SOTR3	SOTR4

Cappetta Snap-On



		Altezza (H)	
		8mm	
Ø4.78mm		SOC	

Analoghi



		Altezza (H)	
		10.5mm	
Standard	Ø3.75mm	ANS	
Larga	Ø5.0mm	ANW	



Protesi Cementata

Tutti i monconi per la protesi cementata sono forniti con l'apposita vite di serraggio (ALAS).

Monconi Provvisori

		Altezza (H)	
		9.5mm	
Rotazionali (no hex.)	Ø4.7mm	TAR	
Non Rotazionali (hex.)	Ø4.7mm	TANR	

Monconi Dritti

		Altezza (H)			
		5mm	7mm	9mm	11mm
Stretto	Ø3.75mm	SAN5	SAN7	SAN9	
Standard	Ø4.5mm	SA5	SA7	SA9	SA11
Largo	Ø5.5mm			SAW9	SAW11

Monconi Dritti - con spalla

		Altezza Collare (CH)			
		1mm	2mm	3mm	4mm
Standard	Ø4.5mm	SA1	SA2	SA3	SA4
Largo	Ø5.4mm	SAW1	SAW2	SAW3	SAW4

Monconi Dritti Anatomici

		Altezza Collare (CH)			
		1mm	2mm	3mm	4mm
Standard	Ø4.5mm	ASA1	ASA2	ASA3	ASA4

Monconi Angolati

		Altezza (H)	
		9mm	11mm
Angolazione Standard 15°		AA15	AA15L
Angolazione Standard 25°		AA25	AA25L



Monconi Angolati - Con spalla




	Altezza Collare (CH)			
	1mm	2mm	3mm	4mm
Angolazione Standard 15°	AA151	AA152	AA153	AA154
Angolazione Standard 25°	AA251	AA252	AA253	AA254

Monconi Angolati Anatomici



	Altezza Collare (CH)		
	1mm	2mm	3mm
Angolazione Standard 15°	AAA151	AAA152	AAA153
Angolazione Standard 25°	AAA251	AAA252	AAA253

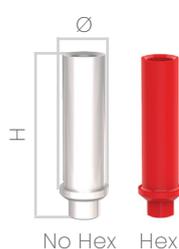

	Altezza (H)	
	10.5mm	
Rotazionali (no hex)	Ø3.75mm	CAR
Non Rotazionali (hex)	Ø3.75mm	CANR

Monconi calcinabili con base in Ti



	Altezza (H)	
	10.5mm	
Non Rotazionali (hex)	Ø4.5mm	CATB

Monconi calcinabili con base in CoCr



	Altezza (H)	
	11mm	
Rotazionali (no hex)	Ø4.0mm	CCR
Non Rotazionali (hex)	Ø4.0mm	CCNR

Vite di serraggio per monconi



Rif
ALAS



Componenti per Overdenture

Attacchi Sferici



	Altezza (H)						
	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
Ø4.0mm	BA1	BA2	BA3	BA4	BA5	BA6	BA7

Cappetta in silicone per attacco a sfera



Ritenzione Standard

Colore

Trasparente

Rif#

BACAP



Ritenzione Soft

Rosa

BACAPP



Ritenzione Strong

Giallo

BACAPY


Cappetta metallica



Rif

BAMH

Attacchi Lock (Kit Completo)

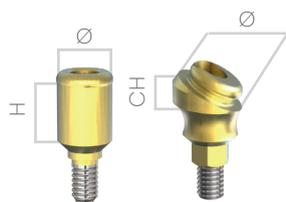

	Altezza (H) - Altezza Collare (CH)						
	0.5mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
Dritto ø3.38mm	LKIT05	LKIT1	LKIT2	LKIT3	LKIT4	LKIT5	LKIT6
Angolato 18° ø3.38mm		ALKIT181	ALKIT182	ALKIT183			
Angolato 30° ø3.38mm		ALKIT301	ALKIT302	ALKIT303			

* Il kit comprende: 1 attacco Lock, 1 cappetta metallica, 1 anello in silicone e 4 ritentori in silicone giallo, rosa, trasparente e viola.

Cappette e ritentori



Ritenzione Extra Soft

Colore

Giallo

Rif#

LOCKES



Ritenzione Soft

Rosa

LOCKSO



Ritenzione Standard

Trasparente

LOCKST



Ritenzione Strong

Viola

LOCKSG

Cappetta per attacchi Lock



Rif

LOCKMH

Anello di silicone



Rif

LOCKRI



Protesi Avvitata Multi-Unit System

MU Monconi Dritti




		Altezza Collare (CH)				
		1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
Ø 4.5mm	MUA1	MUA2	MUA3	MUA4	MUA5	

MU Monconi Angolati



		Altezza Collare (CH)			
		1mm	2mm	3mm	4mm
MU Angolazione 17°	Ø 4.5mm	MUA171	MUA172	MUA173	MUA174
MU Angolazione 30°	Ø 4.5mm	MUA301	MUA302	MUA303	MUA304
MU Angolazione 45°	Ø 4.5mm	MUA451	MUA452	MUA453	

MU Cannule

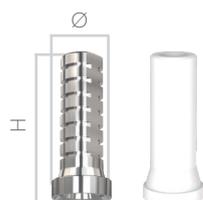

		Altezza (H)	
		12mm	
Titanio	Ø 4.8mm	MUTS	
PMMA	Ø 4.8mm	MUPS	

* In tutte le cannule Multi-Unit è inclusa la vite transfer (MUTRS)

MU Accessori



	Rif
MU Transfer	MUTR
MU Vite Transfer	MUTRS
MU Analoghi	MUAN
MU Viti di guarigione	MUHC
MU Viti di serraggio	MUSC
MU Angolato (Vite di serraggio moncone/impianto)	MUASC




Componenti CAD-CAM

Scan Bodies



	Altezza (H)	
	7mm	9mm
Ø 3.75mm	SB7	SB9

Monconi Ti Base

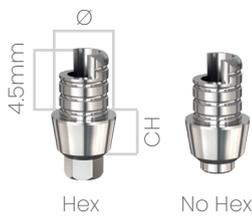

	Altezza Collare (CH)					
	0mm	0.5mm	1.5mm	2.5mm	3.5mm	4.5mm
Non Rotazionali (hex) Ø 4.5mm		TBNR05	TBNR15	TBNR25		
Rotazionali (no hex) Ø 4.5mm	TBR00	TBR05	TBR15	TBR25	TBR35	TBR45

Analoghi digitali



	Altezza (H)
	9.5mm
Ø 3.85mm	DAN

Multi-Unit



	Altezza (H)		
	4.5mm	6mm	10mm
MU Analoghi Digitali Ø 5.0mm			MUDA
MU Scan Body Ø 5.0mm		MUSB	
MU Ti Base Ø 5.0mm	MUTB		



Monconi Ti-Base (compatibili con metodica CEREC® SIRONA)



		Altezza Collare (CH)		
		0.5mm	1.5mm	3.0mm
Non Rotazionali (hex)	Ø 4.3mm	STBNR05	STBNR15	STBNR30
Rotazionali (no hex)	Ø 4.3mm	STBR05	STBR15	STBR30

Strumenti ed accessori

Drivers Impianto per Cricchetto



	Lunghezza (L)	Rif
Corto	10mm	RCDS
Lungo	15mm	RCDL

Drivers Impianto per Manipolo



	Lunghezza (L)	Rif
Corto	22mm	MCDS
Lungo	28mm	MCDL



Kits & Tools



Kit chirurgico

Rif: SK

Il Kit chirurgico è un kit piccolo, semplice ed ergonomico studiato per facilitare le fasi dell'intervento chirurgico. Include un cricchetto dinamometrico e sette frese di alta qualità e lunga durata.

Il kit è disponibile per le piattaforme Alef, Til e Conix.

- Autoclavabile
- Facile da smontare per la pulizia
- Vassoio rimovibile
- Etichettatura degli slot chiara per un facile e corretto posizionamento degli strumenti
- Accesso intuitivo e facile agli strumenti



Contenuto del Kit:

	Rif
Cricchetto dinamometrico	RATQ
Fresa da marcatura Ø1.9	DRLMK
Prolunga per frese	DRLEX
Fresa Ø2.0	DRL20
Fresa Ø2.8	DRL28
Fresa Ø3.2	DRL32
Fresa Ø3.65	DRL365
Fresa Ø4.0	DRL40
Fresa Ø4.5	DRL45
Driver Impianti Alef Lungo da Cricchetto 15mm	RCDL
Driver Protesi Lungo da Cricchetto 15mm	DRPL
Driver Impianti Alef Lungo per Manipolo 28mm	MCDL
Driver Protesi Lungo per Manipolo 28mm	DMPL
Driver Protesi Lungo Manuale 15mm	DML
Driver Impianto Til Lungo per Manipolo	TPMCDL

Kit chirurgico avanzato

Rif: ADSK

Il kit chirurgico avanzato è un kit completo ed ergonomico, che permette di eseguire tutte le procedure previste dai protocolli MSDI, contiene delle frese "step" che permettono una preparazione del sito implantare "a gradino", particolarmente indicata per impianti conici. Il kit, utilizzabile per il posizionamento di Alef, Til e Conix, è pratico e di semplice gestione.

- Autoclavabile
- Facile da smontare per la pulizia
- Vassoio rimovibile
- Etichette chiare per una facile identificazione degli strumenti
- Accesso intuitivo e facile agli strumenti



Contenuto del Kit:

	Rif		Rif
Cricchetto dinamometrico	RATQ	Driver Protesi Corto per Manipolo 20mm	DMPS
Sonda di profondità	DPTH	Driver Protesi Lungo per Manipolo 28mm	DMPL
Fresa Lanceolata Ø1.5	DRSP15	Driver Impianti Corto per Manipolo 22mm	MCDS
Fresa da marcatura Ø1.9	DRLMK	Driver Impianti Lungo per Manipolo 28mm	MCDL
Prolunga per frese	DRLEX	Driver Protesi Corto da Cricchetto 10mm	DRPS
Fresa Ø2.0	DRL20	Driver Protesi Lungo da Cricchetto 15mm	DRPL
Fresa Countersink 3.75/4.2	CSDR42	Driver Impianti Corto da Cricchetto 10mm	RCDS
Fresa Countersink 5.0/6.0	CSDR60	Driver Impianti Lungo da Cricchetto 15mm	RCDL
Mucotomo 4.0	TISP40	Driver Protesi Corto Manuale 10mm	DMS
Mucotomo 4.5	TISP45	Driver Protesi Lungo Manuale 15mm	DML
Pin corto di profondità/parallelismo 10 mm	PDGS	Driver Impianti RP Corto da Cricchetto 10mm	RPRCDS
Pin lungo di profondità/parallelismo 18 mm	PDGL	Driver Impianti RP Lungo da Cricchetto 15mm	RPRCDL
Fresa Step Ø2.0/2.4	STDR24	Driver Impianti NP Corto da Cricchetto 10mm	NPRCDS
Fresa Step Ø2.4/2.8	STDR28	Driver Impianti NP Lungo da Cricchetto 15mm	NPRCDL
Fresa Step Ø2.8/3.2	STDR32	Driver Impianti TP Corto da Cricchetto 10mm	TPRCDS
Fresa Step Ø3.2/3.65	STDR365	Driver Impianti TP Lungo da Cricchetto 15mm	TPRCDL
Fresa Step Ø4.0/4.5	STDR45		
Fresa Step Ø5.0/5.5	STDR55		

Kit chirurgico con stopper

Rif: SSK

Questo completo kit universale include un cricchetto dinamometrico e una vasta gamma di frese con stopper.

Questo kit è disponibile per le piattaforme Alef, Til e Conix.

- Autoclavabile
- Vassoio rimovibile per una facile pulizia
- Etichette chiare per una facile identificazione degli strumenti
- Accesso semplice agli strumenti



Contenuto del Kit:

	Rif		Rif
Cricchetto dinamometrico	RATQ	Fresa con Stopper Ø3.2 13mm	DRLS3213
Fresa per marcatura	DRLMK	Fresa con Stopper Ø3.65 6mm	DRLS3656
Prolunga per fresa	DRLEX	Fresa con Stopper Ø3.65 8mm	DRLS3658
Fresa con Stopper Ø2 6mm	DRLS206	Fresa con Stopper Ø3.65 10mm	DRLS36510
Fresa con Stopper Ø2 8mm	DRLS208	Fresa con Stopper Ø3.65 11.5mm	DRLS365115
Fresa con Stopper Ø2 10mm	DRLS2010	Fresa con Stopper Ø3.65 13mm	DRLS36513
Fresa con Stopper Ø2 11.5mm	DRLS20115	Fresa con Stopper Ø4.2 6mm	DRLS406
Fresa con Stopper Ø2 13mm	DRLS2013	Fresa con Stopper Ø4.2 8mm	DRLS408
Fresa con Stopper Ø2.5 6mm	DRLS256	Fresa con Stopper Ø4.2 10mm	DRLS4010
Fresa con Stopper Ø2.5 8mm	DRLS258	Fresa con Stopper Ø4.2 11.5mm	DRLS40115
Fresa con Stopper Ø2.5 10mm	DRLS2510	Fresa con Stopper Ø4.2 13mm	DRLS4013
Fresa con Stopper Ø2.5 11.5mm	DRLS25115	Fresa con Stopper Ø5.2 6mm	DRLS4506
Fresa con Stopper Ø2.5 13mm	DRLS2513	Fresa con Stopper Ø5.2 8mm	DRLS4508
Fresa con Stopper Ø2.8 6mm	DRLS286	Fresa con Stopper Ø5.2 10mm	DRLS4510
Fresa con Stopper Ø2.8 8mm	DRLS288	Fresa con Stopper Ø5.2 11.5mm	DRLS45115
Fresa con Stopper Ø2.8 10mm	DRLS2810	Fresa con Stopper Ø5.2 13mm	DRLS4513
Fresa con Stopper Ø2.8 11.5mm	DRLS28115	Driver Impianti Lungo da Cricchetto 15mm	RCDL
Fresa con Stopper Ø2.8 13mm	DRLS2813	Driver Protesi Lungo da Cricchetto 15mm	DRPL
Fresa con Stopper Ø3.2 6mm	DRLS326	Driver Impianti Lungo per Manipolo 28mm	MCDL
Fresa con Stopper Ø3.2 8mm	DRLS328	Driver Protesi Lungo per Manipolo 28mm	DMPL
Fresa con Stopper Ø3.2 10mm	DRLS3210	Driver Protesi Lungo Manuale 15mm	DML
Fresa con Stopper Ø3.2 11.5mm	DRLS32115		

Kit Frese

Rif: DRSK

Il Kit Frese contiene tutte le frese necessarie alla preparazione "cilindrica" del sito implantare per gli impianti MSDI. Utile per avere sempre sotto mano frese di ricambio taglienti o nei casi di chirurgie multiple.

- Autoclavabile
- Facile da smontare per la pulizia
- Vassoio rimovibile
- Etichette chiare per una facile identificazione degli strumenti
- Accesso intuitivo e facile agli strumenti



Contenuto del Kit:

	Rif
Fresa Lanceolata Ø1.5	DRSPI5
Fresa da marcatura Ø1.9	DRLMK
Fresa Ø2.0	DRL20
Fresa Ø2.5	DRL25
Fresa Ø2.8	DRL28
Fresa Ø3.2	DRL32
Fresa Ø3.65	DRL365
Fresa Ø4.0	DRL40
Fresa Ø4.5	DRL45
Fresa Ø5.0	DRL50
Fresa Ø5.5	DRL55

Kit Protesico

Rif: SKP

Il Kit Protesico è un pratico set di strumenti utilizzabile durante le fasi di protesizzazione degli impianti MSDI e permette di non dover utilizzare i kit implantari completi quando non siano previste procedure chirurgiche.

- Autoclavabile
- Facile da smontare per la pulizia
- Vassoio rimovibile
- Etichette chiare per una facile identificazione degli strumenti
- Accesso intuitivo e facile agli strumenti



Contenuto del Kit:

	Rif
Cricchetto dinamometrico	RTAQ
Driver Protesici Corti	DMPS
Driver Protesici Lunghi	DMPL
Driver Protesici Corti da Cricchetto 10mm	DRPS
Driver Protesici Lungo da Cricchetto 15mm	DRPL
Driver manuali Lunghi 15mm	DML
Driver manuali Corti 10mm	DMS

Kit Chirurgia Guidata

Rif: GSK

Il Kit Chirurgia Guidata è un pratico kit contenente tutte le frese e i componenti necessari alla realizzazione di interventi di implantologia computer guidata mediante le apposite dime chirurgiche. Le frese sono compatibili con le boccole chirurgiche MSDI. Il kit è compatto ed è pensato per facilitare l'operatore durante tutte le fasi previste dalla chirurgia guidata.

- Autoclavabile
- Facile da smontare per la pulizia
- Vassoio rimovibile
- Etichette chiare per una facile identificazione degli strumenti
- Accesso intuitivo e facile agli strumenti



Contenuto del Kit:

	Rif		Rif
Cricchetto dinamometrico	RATQ	Fresa per Guidata 3.65x11.5	GDRS3611
Fresa Piana per Guidata	GTRF	Fresa per Guidata 3.65x13	GDRS3613
Mucotomo per Guidata 5.0	GTISP50	Fresa per Guidata 4.0x6	GDRS4006
Prolunga per frese	DRLEX	Fresa per Guidata 4.0x8	GDRS4008
Fresa per pin di fissaggio	FIDR	Fresa per Guidata 4.0x10	GDRS4010
Fresa per Guidata 2.0x6	GDRS2006	Fresa per Guidata 4.0x11.5	GDRS4011
Fresa per Guidata 2.0x8	GDRS2008	Fresa per Guidata 4.0x13	GDRS4013
Fresa per Guidata 2.0x10	GDRS2010	Fresa per Guidata 4.5x6	GDRS4506
Fresa per Guidata 2.0x11.5	GDRS2011	Fresa per Guidata 4.5x8	GDRS4508
Fresa per Guidata 2.0x13	GDRS2013	Fresa per Guidata 4.5x10	GDRS4510
Fresa per Guidata 2.8x6	GDRS2806	Fresa per Guidata 4.5x11.5	GDRS4511
Fresa per Guidata 2.8x8	GDRS2808	Fresa per Guidata 4.5x13	GDRS4513
Fresa per Guidata 2.8x10	GDRS2810	Driver Impianti Alef Corto da Cricchetto per Guidata	GDRIMS
Fresa per Guidata 2.8x11.5	GDRS2811	Driver Impianti Alef Lungo da Cricchetto per Guidata	GDRIML
Fresa per Guidata 2.8x13	GDRS2813	Driver Impianti Til Corto da Cricchetto per Guidata	GTPDRIMS
Fresa per Guidata 3.2x6	GDRS3206	Driver Impianti Til Lungo da Cricchetto per Guidata	GTPDRIML
Fresa per Guidata 3.2x8	GDRS3208	Boccole a T	GDS5
Fresa per Guidata 3.2x10	GDRS3210	Pin di fissaggio per Guidata	GDFIX
Fresa per Guidata 3.2x11.5	GDRS3211	Driver Protesi Corto Manuale 10mm	DMS
Fresa per Guidata 3.2x13	GDRS3213	Driver Protesi Lungo Manuale 15mm	DML
Fresa per Guidata 3.65x6	GDRS3606	Pin corto di profondità/parallelismo 10 mm	PDGS
Fresa per Guidata 3.65x8	GDRS3608	Pin lungo di profondità/parallelismo 18 mm	PDGL
Fresa per Guidata 3.65x10	GDRS3610		

Frese per osteotomia

		Rif
	Fresa Pilota Ø1.2	DRPL1216
	Fresa Pilota Ø1.5	DRPL1516
	Fresa da marcatura Ø1.9	DRLMK
	Prolunga per frese	DRLEX
	Fresa Ø2.0	DRL20
	Fresa Ø2.8	DRL28
	Fresa Ø3.2	DRL32
	Fresa Ø3.65	DRL365
	Fresa Ø4.0	DRL40
	Fresa Ø4.5	DRL45
	Fresa Ø5.0	DRL50
	Fresa Ø5.5	DRL55

Frese accessorie

		Rif
	Fresa Trepine 3.0/4.0	TPBR3
	Fresa Trepine 4.0/5.0	TPBR4
	Fresa Trepine 5.0/6.0	TPBR5
	Fresa Countersink 3.75*4.2	CSDR42
	Fresa Countersink 5.0*6.0	CSDR60
	Mucotomo 3.0	TISP30
	Mucotomo 4.0	TISP40
	Mucotomo 4.5	TISP45
	Mucotomo 5.0	TISP50


Pin di profondità/parallelismo

	Rif
 Pin corto di profondità/parallelismo 10 mm	PGDS
Pin lungo di profondità/parallelismo 18 mm	PGDL

Sonda di profondità

	Rif
 Sonda di profondità	DPTH

Drivers

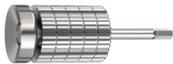	Rif
 Driver Protesi Corto da Cricchetto 10mm	DRPS
Driver Protesi Lungo da Cricchetto 15mm	DRPL
 Driver Protesi Corto Manuale 10mm	DMS
Driver Protesi Lungo Manuale 15mm	DML
 Driver Protesi Corto per Manipolo 20mm	DMPS
Driver Protesi Lungo per Manipolo 28mm	DMPL

Cricchetto



	Rif
Cricchetto dinamometrico	RATQ

Inseritori manuali



	Rif
Inseritore manuale impianti	SSDM



Inseritore manuale per Implant Carrier	SSID
--	------

I prodotti MSDI rispettano i più elevati standard stabiliti dalla FDA, CE, ISO 13485 e altri standard normativi. Avviso legale: alcuni prodotti potrebbero non essere autorizzati per la vendita in specifici territori. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la sede centrale di MSDI o il distributore locale di MSDI.

© 2024 MSDI Ltd. Tutti i diritti riservati.



Feel the connection

msdi

msdi-dental.com

distributore per l'ITALIA Neofos srl

Neofos

neofosmed.com